

CRYO NOV



CRYO NOV

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
CONCEPT	3
INDICATIONS	3
CONTRE-INDICATIONS	3
AVERTISSEMENTS GENERAUX ET MISES EN GARDE	4
Mises en garde	5
HOMOLOGATION	6
Protection contre les chocs électriques :	6
Protection contre la pénétration d'eau nuisible :	6
Interférence électromagnétique :	6
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	7
Système CRYO NOV	7
Modes de fonctionnement	8
UTILISATION DU SYSTEME CRYO NOV	9
Remarques :	9
Avertissement :	9
Mise en garde :	9
NETTOYAGE	13
ENTREPOSAGE	15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	15
ACCESSOIRES	16
GARANTIE	17
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE	18
LIMITATIONS DE RESPONSABILITE	18
ANNEXE 1	19

CONCEPT

CRYO NOV est un système permettant d'optimiser la récupération sportive. Le contrôleur **CRYO NOV** doit systématiquement être utilisé avec une enveloppe de la gamme CRYO NOV dédiée à l'appareil **CRYO NOV** (cf tableau correspondance en annexe1). Idéal après une séance pour optimiser sa récupération !

INDICATIONS

Le système **CRYO NOV** est conçu pour optimiser la récupération. Le contrôleur comporte 9 modes conçus pour des enveloppes dédiées.

CONTRE-INDICATIONS

Le système **CRYO NOV** ne doit **pas** être utilisé dans les contextes suivants :

- Les stades aigus d'une phlébite inflammatoire dans la région où est positionnée l'enveloppe.
- Personnes ayant des antécédents ou des facteurs de risque de thrombose profonde ou d'embolie pulmonaire (y compris un alitement prolongé) dans la région veineuse où est positionnée l'enveloppe.
- Personnes atteintes d'une artériosclérose significative ou d'autres maladies ischémiques vasculaires dans la région où est positionnée l'enveloppe.
- Personnes souffrantes d'un état dans lequel une augmentation du retour veineux lymphatique est indésirable dans le membre affecté (carcinome, par exemple).
- Personnes ayant une hypertonie décompensée dans la région où est positionnée l'enveloppe.
- Personnes présentant une atteinte vasculaire significative dans la région où est positionnée l'enveloppe (en raison de gelures antérieures, diabète, artériosclérose ou ischémie, par exemple)
- Personnes atteintes d'hémoglobinurie paroxystique induite par le froid.

AVERTISSEMENTS GENERAUX ET MISES EN GARDE

Nous vous remercions d'avoir choisi le système **CRYO NOV**. Afin de garantir une utilisation optimale, nous vous remercions de lire le manuel d'utilisation en intégralité avant la mise en fonction du produit.

Avertissements

Une mise en place incorrecte des enveloppes ou une utilisation prolongée du **CRYO NOV** risque de provoquer des lésions tissulaires, comme des gelures.

Au cours du traitement, les patients doivent surveiller la peau autour de la région traitée ou les doigts/orteils du membre traité et être attentif à toute sensation de brûlure, de démangeaison, une aggravation du gonflement ou des douleurs. Si l'un de ces signes se produit, ou qu'un changement cutané est visible (tels que des cloques, rougeurs aggravées, une coloration anormale ou autres altérations visibles de la peau), il est conseillé aux utilisateurs de cesser d'utiliser le système et de consulter un médecin.

Les enveloppes **CRYO NOV** ne sont pas stériles ; ne pas les placer directement au contact de la peau, d'une lésion ouverte, une plaie, un érythème, une infection ou des sutures. Elles peuvent être placées par-dessus les vêtements ou un pansement. Elles ne doivent en aucun cas être en contact direct avec la peau.

Les enveloppes **CRYO NOV** sont disponibles en différentes configurations et destinées à des programmes précis (cf annexe 1).

Une attention particulière est requise pour les personnes suivantes :

- Personnes atteintes de la maladie de Raynaud ou d'une hypersensibilité au froid (urticaire au froid) ;
- Personnes hypertensives ou hypotensives ;
- Personnes diabétiques ;
- Personnes présentant une altération de la circulation locale sanguine ou une atteinte neurologique (notamment une paralysie en raison d'interventions chirurgicales multiples) dans la région à traiter ;
- Personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde dans la région à traiter ;

Pour éviter le risque de choc électrique :

- Ne pas retirer les panneaux du contrôleur **CRYO NOV** ;
- Toujours éteindre le système et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'ajouter ou de vider la glace et l'eau ;
- Ne pas utiliser un autre adaptateur que celui fourni par CRYO NOV. L'utilisation d'autres adaptateurs risque de provoquer un choc électrique et annule la garantie ;

Mises en garde

- Ne pas utiliser le système sans avoir mis de l'eau dans le compartiment à glace ;
- Ne jamais utiliser le système avec des cordons d'alimentation ou des tuyaux ou connecteurs endommagés ni en présence d'autres endommagements mécaniques, ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement ;
- Ne pas verser de l'eau chaude dans le compartiment à glace. Le système n'est pas conçu pour être utilisé avec de l'eau chaude ;
- Ne pas soulever le contrôleur **CRYO NOV** par le couvercle. Le porter uniquement par la poignée ;
- Ne pas utiliser d'enveloppes provenant d'autres fabricants avec le système **CRYO NOV** ;
- Ne pas utiliser le contrôleur **CRYO NOV** sans que le tuyau connecteur ne soit raccordé ;
- Le contrôleur **CRYO NOV** est un appareil que vous devez manipuler avec soin ;
- Ne pas le laisser chuter, veiller à le manipuler avec précaution. Une utilisation inappropriée ainsi que toute intervention technique sur l'appareil sans accord préalable que CRYO NOV annulent toutes les garanties ;
- Ne pas placer l'adaptateur secteur à l'intérieur du réservoir pour le rangement ou le transport ;

Outre les mises en garde ci-dessus, ce manuel contient des avertissements et précautions de sécurité supplémentaires indiqués de part et d'autre. Lire et observer soigneusement ces instructions avant d'utiliser le système.

HOMOLOGATION

Protection contre les chocs électriques :

Le système **CRYO NOV** est un appareil de Classe I (protection liée à la prise de terre) lorsqu'il est raccordé à l'adaptateur secteur AC/DC 12V.

Protection contre la pénétration d'eau nuisible :

Ce produit assure une protection ordinaire contre la pénétration d'eau.

Degré de sécurité en présence d'anesthésiques inflammables ou d'oxygène :

Ne convient pas à une utilisation dans un environnement enrichi en oxygène ou en présence d'anesthésiques inflammables.

Interférence électromagnétique :

Cet appareil a été testé et classé conforme aux limites de la norme IEC 60601-1-2 :2001 relatives aux dispositifs médicaux. Ces limites sont conçues afin d'assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible. Cet appareil produit, utilise et peut générer un rayonnement d'ondes radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut créer des interférences nuisibles avec d'autres dispositifs à proximité. Il n'existe cependant aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil crée des interférences nuisibles avec d'autres dispositifs, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil. Il est recommandé que l'utilisateur tente d'en corriger la cause en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le dispositif receveur ;
- Augmenter la distance séparant les appareils ;
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit différent de ceux sur lesquels le ou les autres appareils sont branchés ;
- Consulter le fabricant pour obtenir de l'assistance ;

Nous vous rappelons que toutes interventions techniques sur le contrôleur CRYO NOV sont interdites sans accord préalable de CRYO NOV.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Adaptateur secteur
Réf : Adaptor
(Inclus)



Tuyau à double connecteurs
Code : KRP/MYY-1
(Inclus)



Sac de transport
Réf : KRP/MYY-2

Système CRYO NOV

Les articles suivants sont inclus avec votre système **CRYO NOV** :

- 1 contrôleur ;
- 1 adaptateur secteur ;
- 1 cordon d'alimentation ;
- 1 tuyau connecteur ;
- 1 sac de transport ;
- 1 embout purgeur ;
- 1 kit de documentation (manuel, informations sur le système) ;

Les enveloppes sont vendues séparément et ne sont pas incluses avec le système. Une enveloppe doit cependant être connectée au contrôleur via le tuyau avant de démarrer la séance.

Modes de fonctionnement


Interrupteur : Appuyer 3 secondes pour mettre en marche le contrôleur **CRYO NOV**.

Marche / Arrêt : Appuyer sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause le contrôleur **CRYO NOV**.

Bouton ⊕ ou ⊖ : Appuyer sur le bouton + ou – pour faire défiler le mode de votre choix et ainsi en déterminer la durée.

Mode	Pression Press	Time on	Time off	<u>Remarque</u> Mode : Le numéro affiché correspond à l'un des 9 modes préenregistrés. Pression : Correspond à l'intensité du flux d'eau envoyé dans l'enveloppe. Durée : Correspond à la durée du cycle d'« envoi d'eau/pause » en alternance avec la phase de pause
1	Basse Low	20	20	
2		40	40	
3		60	60	
4	Moyenne Mid	20	20	
5		40	40	
6		60	60	
7	Élevée High	20	20	
8		40	40	
9		60	60	

Veillez à vérifier le mode préconisé pour chaque enveloppe (annexe 1)

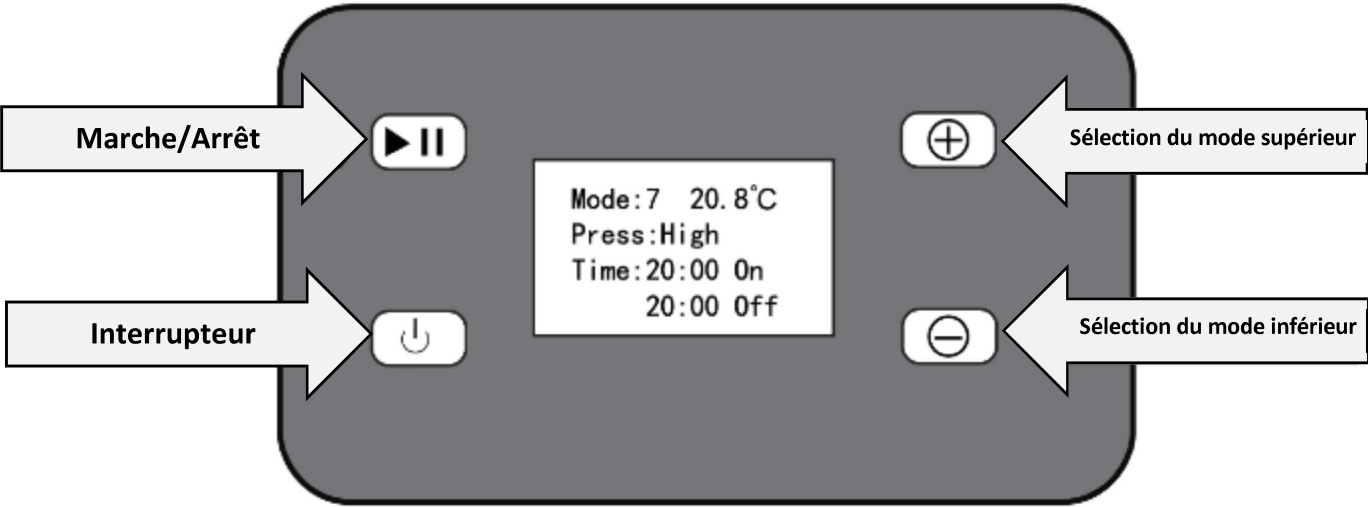

Éléments requis pour utiliser le système CRYO NOV :

- Le réservoir doit être rempli de glace et d'eau ;
- Un adaptateur secteur fourni par CRYO NOV
- Un tuyau connecteur
- Une enveloppe de cryothérapie (annexe 1)

Remarques :

- Le contrôleur **CRYO NOV**, le tuyau et l'enveloppe constituent un circuit fermé dans lequel l'eau froide circule ;
- Placer le contrôleur **CRYO NOV** au sol (une surface plate et stable) pendant l'utilisation ;
- Dans le cas d'une utilisation du système **CRYO NOV** dans un environnement à température ambiante élevée, la capacité du système à procurer un refroidissement adéquat sera plus limitée dans le temps ;

Avertissement :

Avant l'utilisation, brancher le contrôleur **CRYO NOV** sur une prise électrique avec l'adaptateur secteur fourni avec le contrôleur.

Mise en garde :

- Le non-respect des directives d'installation peut produire un résultat inadéquat ;
- Débrancher le contrôleur **CRYO NOV** de la prise électrique avant de remplir le réservoir de glace et d'eau ;


ETAPE 1

Placer le contrôleur **CRYO NOV** au sol et à portée de main.

Pousser le clapet de libération du couvercle en direction de l'écran (1) puis le retirer.

Ajouter de l'eau (2) au moins jusqu'à la limite « Water Min », puis de la glace (3) sans dépasser la limite « Ice Max ». Fermer le couvercle du compartiment à glace, s'assurer qu'un clic soit entendu (4).

Connecter ensuite l'adaptateur secteur au contrôleur (5), puis le brancher (6).

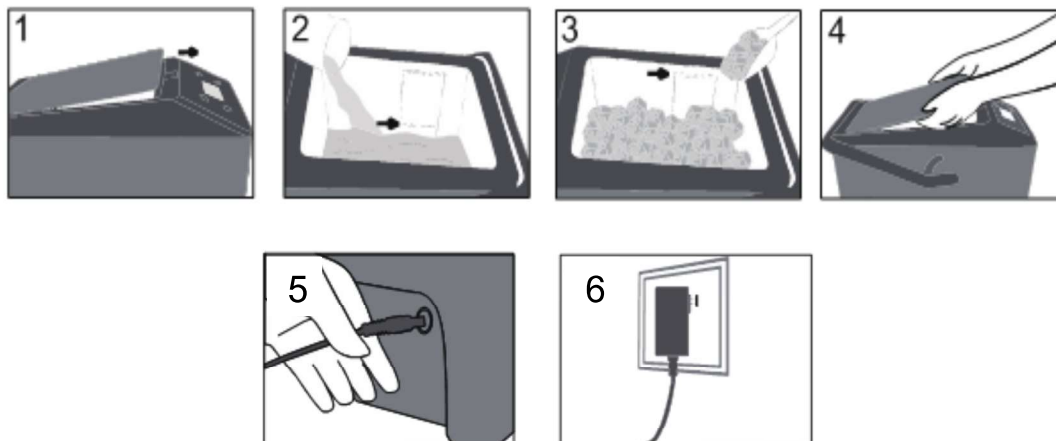


Ne pas transporter le CRYO NOV une fois l'étape 1 terminée.

ETAPE 2

Mettre en place l'enveloppe indiquée sur le membre correspondant (consulter le guide d'utilisation de chaque enveloppe pour des directives de mise en place).

Placer un tissu fin à l'intérieur de l'enveloppe (7), puis positionner celle-ci sur le membre (8), serrer les sangles sans le comprimer (9, 10).

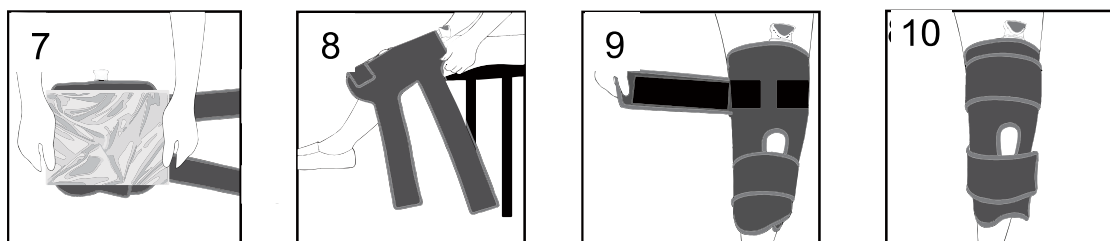




Avertissement :

Bien respecter les limites « Water Min » et « Ice Max » pour le bon fonctionnement du CRYO NOV.

Ne pas placer l'enveloppe directement au contact de la peau, d'une lésion ouverte, une plaie, un érythème, une infection ou des sutures. Peut être placé par-dessus les vêtements ou un pansement.

ETAPE 3

Relier le tuyau connecteur au contrôleur **CRYO NOV** (11) puis à l'enveloppe (12). Respecter le sens d'insertion à l'aide du détrompeur. Une fois le montage finalisé (13), commencer la séance.

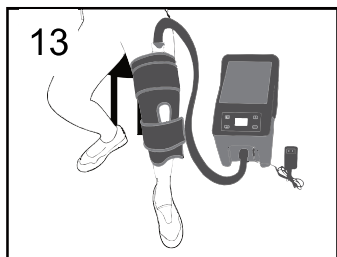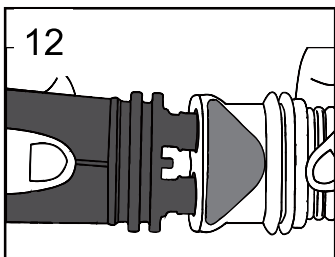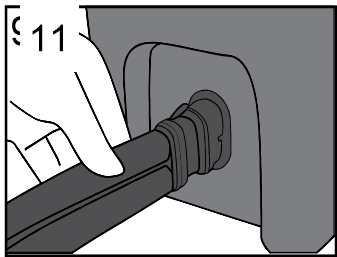

ETAPE 4

Appuyer 3 secondes sur l'interrupteur  pour mettre en marche le contrôleur **CRYO NOV**.

ETAPE 5

Appuyer sur le bouton + ou - pour choisir le mode et la pression.

Mode	Pression <i>Press</i>	Time on	Time off	<u>Remarque</u> Mode : Le numéro affiché correspond à l'un des 9 modes préenregistrés. Pression : Correspond à l'intensité du flux d'eau envoyé dans l'enveloppe. Durée : Correspond à la durée du cycle d'« envoi d'eau/pause » en alternance avec la phase de pause
1	<i>Basse Low</i>	20	20	
2		40	40	
3		60	60	
4	<i>Moyenne Mid</i>	20	20	
5		40	40	
6		60	60	
7	<i>Élevée High</i>	20	20	
8		40	40	
9		60	60	

Veillez à vérifier le mode préconisé pour chaque enveloppe (annexe 1)

Le système CRYO NOV et les enveloppes ne sont pas des dispositifs médicaux, l'appréciation de leurs propriétés est laissée à la discrétion des prescripteurs et utilisateurs.

ETAPE 7

Appuyer sur le bouton Marche/arrêt ►|| pour démarrer ou arrêter le contrôleur **CRYO NOV**.
Vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/arrêt ►|| pour mettre en pause le contrôleur **CRYO NOV**.

ETAPE 8

Une fois la séance terminée, appuyer 3 secondes sur le bouton ⏏ pour éteindre le contrôleur **CRYO NOV**.



ETAPE 9

Mettre l'enveloppe en hauteur et la presser pour évacuer l'eau dans le réservoir (14).

Déconnecter le tuyau de l'enveloppe (15).

Déconnecter le tuyau du contrôleur **CRYO NOV** (16).



Après utilisation, vider la glace et l'eau du réservoir **CRYO NOV**.

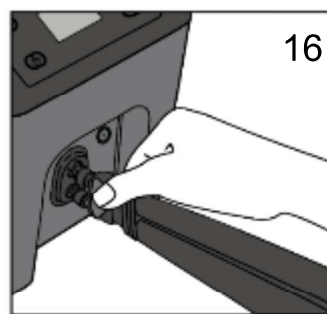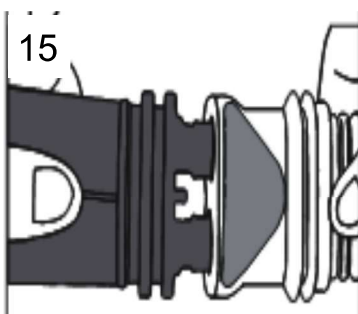

ETAPE 10

Connecter l'embout purgeur à l'enveloppe (17) et presser légèrement celle-ci afin de laisser le reste d'eau s'écouler (18).

Retirer l'embout purgeur et le ranger dans le sac.

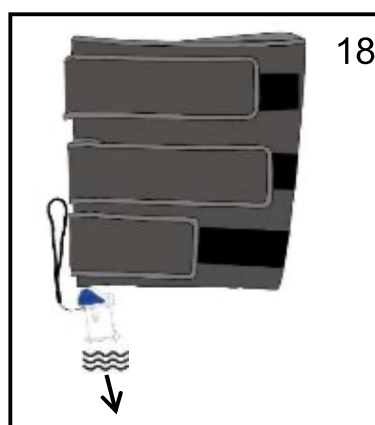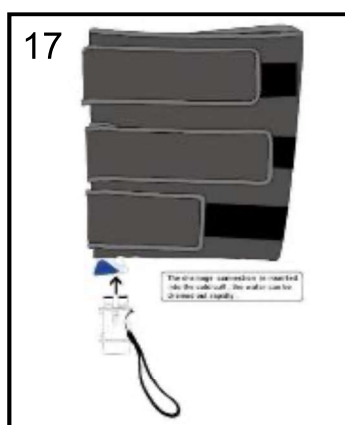

CONTROLEUR CRYO NOV

L'extérieur du contrôleur **CRYO NOV** et les surfaces intérieures visibles du réservoir peuvent être nettoyés avec un linge doux et l'un des produits nettoyants suivants :

- Nettoyant et désinfectant type ANIOS Surfa'safe ou ANIOS Spray surf 29 ;
- Détergent doux ;
- Solution d'eau de Javel à 5% ;
- Eau oxygénée à 6% (Peroxyde d'hydrogène) ;
- Alcool isopropylique à 70% ;

NE PAS UTILISER

- Désinfectants phénoliques ;
- Ammonium quaternaire ;
- Nettoyants à base de solvants. Cela risque d'endommager les plastiques et annulera la garantie ;
- Matériaux abrasifs. Cela risque d'endommager les plastiques et annulera la garantie ;

Attention : Le contrôleur **CRYO NOV** n'est pas un appareil étanche. Ne pas diriger un jet direct de liquide sur le contrôleur, ne pas immerger, ne pas laisser de liquides s'accumuler à la surface du panneau à l'avant du contrôleur **CRYO NOV**.

Procédure :

- Observer les instructions et les mises en garde du fabricant du produit nettoyant sélectionné ;
- Appliquer le nettoyant sélectionné avec un linge doux et essuyer toutes les surfaces du contrôleur **CRYO NOV** ;
- Laisser complètement sécher le contrôleur avant de le ranger dans sa housse de transport ;
- Nettoyer le contrôleur **CRYO NOV** régulièrement ;

ENTRETIEN DU CONTROLEUR

Il est conseillé de faire un détartrage tous les trimestres.

Pour nettoyer le circuit interne du contrôleur de la machine, il faut le connecter à une enveloppe via le tuyau, mettre de l'eau dans le réservoir et du vinaigre blanc à 14% à hauteur de 30% du volume total. Lancer le programme 1 avec 20 min de travail et 20 min de repos. Puis vider le réservoir et l'enveloppe et refaire la même procédure avec de l'eau pour rincer l'ensemble.

TUYAU CONNECTEUR

Le tuyau connecteur peut être nettoyé avec un linge doux et l'un des produits suivants :

- Détergent doux ;
- Nettoyant et désinfectant type ANIOS Surfa'safe ou ANIOS Spray surf 29 ;
- Alcool isopropylique à 70 %. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'ammonium quaternaire ;

NE PAS UTILISER :

- Désinfectants phénoliques ;
- Nettoyants à base de solvants. Cela risque d'endommager les plastiques et annulera la garantie ;
- Matériaux abrasifs. Cela risque d'endommager les plastiques et annulera la garantie ;
- Lubrifiants à base de pétrole. Si une lubrification est nécessaire, il est recommandé d'utiliser un spray à base de silicone sec ;

ENVELOPPES

Selon les besoins, la surface externe de l'enveloppe peut être nettoyée en l'essuyant avec des lingettes nettoyantes type ANIOS ou spray type ANIOS Surfa'safe ou ANIOS Spray surf 29, ou lavée à la main avec une très petite quantité de détergent doux ou de savon antibactérien.

NE PAS LAVER A LA MACHINE. Faire circuler périodiquement de l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène à 6%, (entre 500 à 1000ml) dans le système **CRYO NOV** pour assurer la propreté de l'intérieur de l'enveloppe.

JOINTS TORIQUES :

Afin d'assurer l'étanchéité, il est conseillé d'entretenir 1 fois/mois les joints de la machine et des enveloppes par un entretien avec du silicone sec.



SAC DE TRANSPORT

Le sac de transport doit être nettoyé avec un linge doux ou une brosse douce et un détergent doux.

Veiller à tester tout produit sur une petite partie du sac pour s'assurer qu'il ne l'endommagera pas.

Remarque : Pour utiliser le contrôleur **CRYO NOV**, il n'est pas nécessaire de le retirer de la housse. Ouvrir simplement la fermeture éclair du compartiment principal. Remplir le réservoir de glace et d'eau. Raccorder le tuyau connecteur et l'adaptateur secteur au panneau latéral du contrôleur **CRYO NOV** et brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique.

ENTREPOSAGE

Pour ranger le système en fin de journée après l'utilisation :

- Débrancher l'adaptateur secteur et le tuyau connecteur du contrôleur **CRYO NOV** ;
- Pousser le clapet de libération en direction de l'écran pour ouvrir le couvercle ;
- Vider la glace et l'eau ;
- Essuyer l'excédent d'eau ;
- Entreposer le contrôleur **CRYO NOV** dans sa housse ou dans un autre lieu sûr ;
- Entreposer le contrôleur **CRYO NOV** avec le couvercle complètement ouvert pour laisser sécher l'intérieur et préserver l'étanchéité du réservoir ;

Attention :

Ne pas entreposer à des températures extrêmes, c'est-à-dire plus de 49°C (120 F°) ou moins de 1°C (33°F).

Ne pas laisser le contrôleur **CRYO NOV** dans une voiture chaude ou très froide. Tenir le contrôleur éloigné de la lumière directe du soleil. Les rayons UV peuvent endommager ou décolorer le contrôleur **CRYO NOV**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	Contrôleur CRYO NOV
Entrée AC	100-240V, 50/60Hz
Sortie DC	12V, 2A
Menu Affichage	9 modes
	Durée : 20min / 40min / 60min par cycle
	Des modes adaptés pour chaque d'enveloppe
Type de Flux	Intermittent
Affichage	1.83" LCD (Mode / Intensité / Durée / Température de l'eau)
Capacité du réservoir	3.6L
Niveau sonore	< 50 dB
Couleur	Rouge & Noir
Longueur du tuyau	1.5m
Dimensions	335*205*205 mm
Poids net	2 kg

ACCESSOIRES

Le contrôleur **CRYO NOV** peut être utilisé avec les accessoires suivants :

- Toutes les enveloppes **CRYO NOV** de la gamme CRYO NOV. Les enveloppes d'autres fabricants NE PEUVENT PAS être utilisées avec ce système ;
- Bloc d'alimentation et cordon d'alimentation, fournis par **CRYO NOV** ;
- Tuyau connecteur ;
- House de transport ;
- Embout purgeur ;

GARANTIE

CRYO NOV garantit que le contrôleur **CRYO NOV** (et ses accessoires, le tuyau connecteur et adaptateur secteur), s'ils sont correctement utilisés, seront exempt de vices matériels et de main-d'œuvre pendant une période d'un 1 an ou 2500 heures d'utilisation suivant la date à laquelle le contrôleur **CRYO NOV** a été acheté et livré. La garantie démarrera à la date de réception du matériel.

Si le contrôleur **CRYO NOV**, visé par cette garantie limitée, tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons couvertes par cette garantie limitée, CRYO NOV pourra, à sa discrétion :

- REPARER OU REMPLACER le contrôleur **CRYO NOV** par un autre contrôleur **CRYO NOV**, CETTE GARANTIE LIMITEE ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT EXISTER AU TITRE DE LA REGLEMENTATION D'ETAT S'APPLIQUENT UNIQUEMENT A L'ACHETEUR D'ORIGINE DU CONTRÔLEUR **CRYO NOV** ET NE SONT PAS TRANSFERABLES ;

Toutefois,

Portée de la garantie limitée

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant de causes externes, notamment et sans s'y limiter, les accidents, les utilisations non-conformes aux instructions du produit, les abus, la négligence, les modifications et les réparations.

Obtention des services de garantie

Pour obtenir des services de garantie, contacter CRYO NOV au 09 70 70 90 95.

CRYO NOV n'accepte aucun retour du contrôleur **CRYO NOV** sans l'ensemble des renseignements liés à l'appareil, date d'achat et coordonnées de l'établissement.

Si le contrôleur **CRYO NOV** est renvoyé à CRYO NOV, l'acheteur est seul responsable des risques d'endommagement liés au transport. L'emballage d'origine ou un emballage équivalent doit être utilisé.

CRYO NOV peut décider de réparer, retourner ou remplacer le contrôleur **CRYO NOV** par un produit neuf ou remis à neuf. En cas de remplacement, le produit retourné devient la propriété de la société CRYO NOV dès sa réception. Le contrôleur **CRYO NOV** de remplacement est couvert par cette garantie écrite et soumis aux mêmes limitations et exclusions pour le reste de la période de garantie d'origine.

CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE TOUS LES ACCESSOIRES.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

Ces garanties remplacent toute autre garantie expresse ou implicite, notamment et sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité ou d'adéquation à un usage particulier. CRYO NOV ne fait aucune garantie expresse autre que celles énoncées ici. CRYO NOV exclut toute autre garantie expresse ou implicite, notamment et sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité ou d'adéquation à un usage particulier. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion de garanties limitées, cette limitation peut ne pas être applicable dans la durée de la période de la garantie limitée. Aucune garantie n'est applicable après cette période. Certaines juridictions n'autorisant pas les limitations de durée d'une garantie limitée, cette limitation peut ne pas être applicable dans ce cas.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

La responsabilité de la société CRYO NOV au titre de cette garantie et de toute autre garantie expresse ou implicite se limite à la réparation ou au remplacement, tel qu'énoncé ci-dessus. Ces recours constituent les seuls et uniques recours au titre de la garantie.

La société CRYO NOV ne peut être tenue pour responsable des dommages directs, particuliers, accessoires ou indirects résultant d'une violation de garantie ou d'une théorie de droit quelconque, notamment et sans s'y limiter, les pertes de profits, l'indisponibilité, la bonne volonté et les dommages aux équipements et aux biens ou leur remplacement. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans ce cas.

Cette garantie limitée donne à l'acheteur des droits spécifiques, et celui-ci peut avoir d'autres droits selon la juridiction.

CRYO NOV SE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DU CONTROLEUR CRYO NOV ET DE SES ACCESSOIRES.

ANNEXE 1

MODES PRECONISES POUR CHAQUE ENVELOPPE

- Enveloppe de genou
- Enveloppe de pied/cheville
- Enveloppe d'épaule
- Enveloppe universelle vétérinaire
- Enveloppe de dos/poitrine/hanche
- Enveloppe de cuisse
- Enveloppe de jambe

Mode	Genou	Jambe	Dos/ Hanche / Poitrine	Pied/ Cheville	Cuisse	Epaule	Universelle vétérinaire
1/2/3	x						x
4/5/6				x	x	x	
7/8/9		x	x				

L'utilisateur est libre de choisir un autre mode selon son ressenti et l'intensité de la séance de sport qu'il a effectué.

CRYO NOV définit la durée de vie d'une enveloppe à 200 heures maxi d'utilisation. Toutefois, ce matériel doit être renouvelé dès l'apparition d'une modification de son intégrité.

CRYO NOV

CRYO NOV S.A.S

Siège et Agence : 22 Avenue d'Albi 81150 Marssac-sur-Tarn

Tél. : + 33 9 70 70 90 95

Mail : contact@cryonovnov.com Site Internet : cryonov.com